

마인드봄.

마인드봄 종합보고서 작성 매뉴얼

검사 결과 통합 · AI 검토 보조 · 보고서 생성
임상심리사 · 상담사용



Contents

마인드봄 종합보고서 작성 매뉴얼

1 종합보고서 작성 화면

1-1 화면 구성

2 검사자료 첨부

2-1 자료 목록 확인

2-2 본문에 자료 삽입

3 검사 간 교차분석

3-1 교차분석 개요

3-2 표준 점수 비교

3-3 영역별 소견 대조

4 구간별 AI 리뷰 문장 단위

4-1 리뷰 실행

4-2 리뷰 카드 읽기

4-3 수정안 적용

5 종합 AI 리뷰 문서 단위

5-1 분석 실행

5-2 결과 읽기

5-3 수정안 검토와 반영


6 보고서 생성

1 종합보고서 작성 화면

1-1 화면 구성

1-1 화면 구성

- 종합보고서 작성 화면은 좌측 사이드바 · 중앙 본문 · 상단 툴바로 구성됩니다.
- 좌측 사이드바에서 검사자료를 첨부하고 검사 간 교차분석을 확인합니다.
- 중앙 본문은 A4 규격이며, 실제 인쇄물과 같은 모양으로 편집합니다.
- 상단 툴바에서 서식을 지정하고 AI 종합 리뷰를 실행합니다.

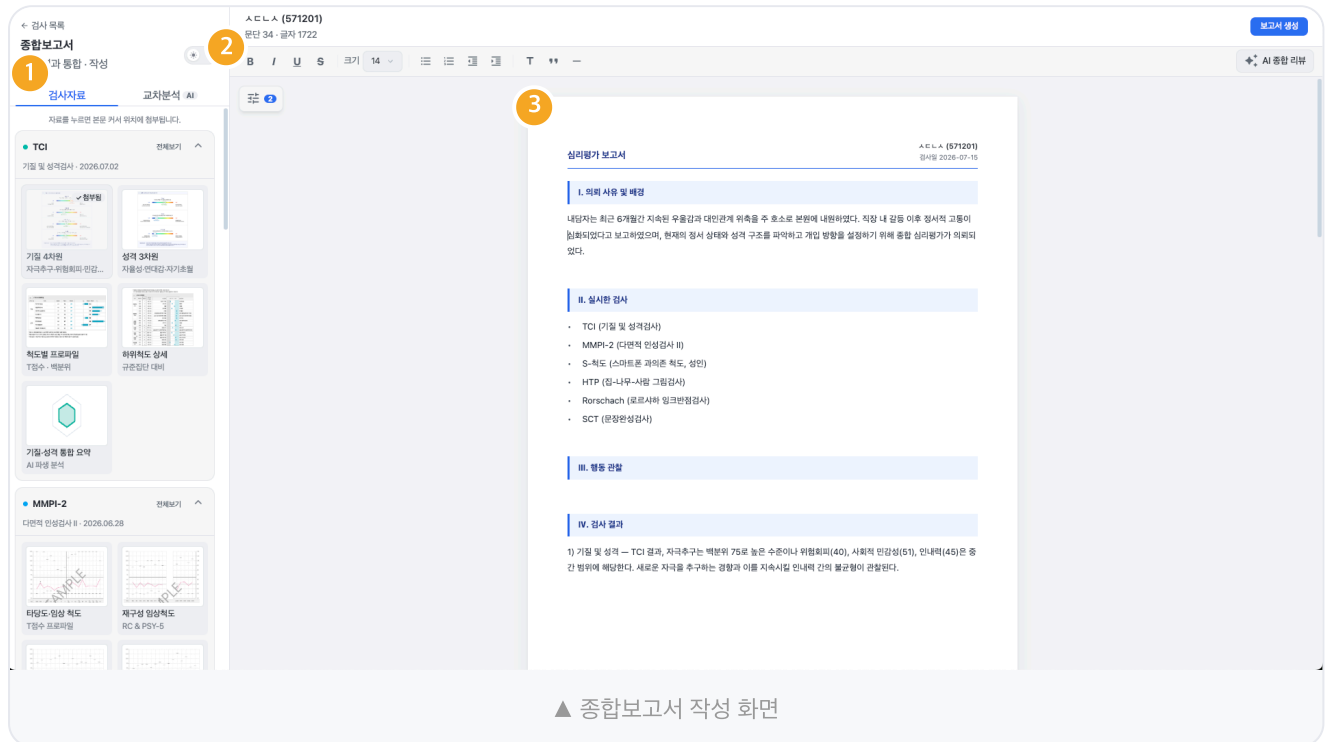

1 좌측 사이드바

- [검사자료] 탭에서 결과지를 본문에 첨부하고, [교차분석] 탭에서 검사 간 소견을 대조합니다.

2 상단 툴바

- 글꼴 서식·목록·정렬 등 편집 도구와 우측의 [AI 종합 리뷰] 버튼이 있습니다.

3 중앙 본문 (A4)

- 보고서 내용을 작성합니다. 상단에 문단 수와 글자 수가 표시됩니다.


2 검사자료 첨부

2-1 자료 목록 확인

2-2 본문에 자료 삽입

2-1 자료 목록 확인

- 좌측 [검사자료] 탭에 내담자가 받은 검사와 그 결과지가 표시됩니다.
- 검사별로 접기/펼치기가 가능하며, [전체보기]로 결과지 원본을 확인할 수 있습니다.
- 확인이 완료되지 않은 검사에는 상태 배지가 함께 표시됩니다.

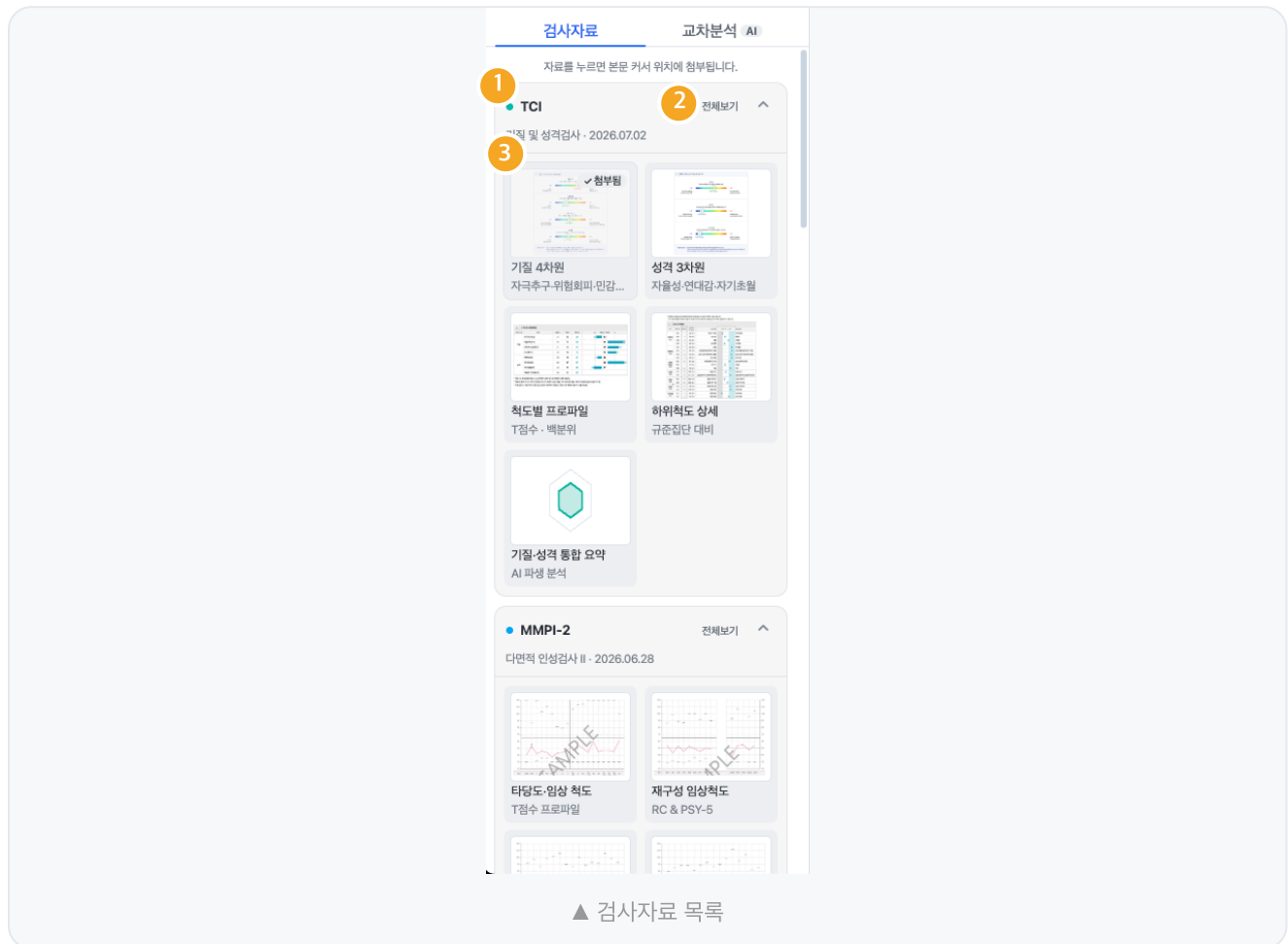

1 검사 헤더

- 검사 코드와 검사명 · 검사일이 표시됩니다. 우측 화살표로 목록을 접거나 펼칩니다.

2 전체보기

- 해당 검사의 결과지 원본을 큰 화면으로 확인합니다.

3 자료 썸네일

- 결과지·차트·표가 썸네일로 표시됩니다. 클릭하면 본문에 삽입됩니다.

2-2 본문에 자료 삽입

- 본문에서 자료를 넣을 위치에 커서를 둡니다.
- 좌측 자료 썸네일을 클릭하면 커서 위치에 삽입됩니다.
- 이미 삽입한 자료에는 **첨부됨** 표시가 붙어 같은 자료를 두 번 넣는 실수를 막습니다.

The screenshot shows a document editor interface for ACLA (571201). The main content area displays a '심리평가 보고서' (Psychological Evaluation Report) with several charts and graphs. The left sidebar contains a '검사항목' (Checklist) with categories like 'TCI' and 'MMPI-2'. The right sidebar shows a '보고서 생성' (Generate Report) button. The main text area includes a '심리평가 보고서' section with a '기질 - 유전적으로 타고난 자동적 반응' (Temperament - Innate automatic response) section. This section contains four charts: '자극 추구' (Sensory Seeking), '위험 회피' (Risk Avoidance), '사회적 민감성' (Social Sensitivity), and '인내력' (Endurance). Each chart shows a scale from '낮음' (Low) to '높음' (High) with a central marker indicating the subject's level. For example, '자극 추구' is marked at 'H' (High), '위험 회피' at 'M' (Medium), '사회적 민감성' at 'M' (Medium), and '인내력' at 'M' (Medium). Below the charts, there is a note about the '검사의 한계' (Limitations of the test) and a reference to '그림 1) TCI 기질 4차원' (Figure 1) TCI Temperament 4 Dimensions.

▲ 결과지 이미지가 본문에 삽입된 상태

참고 · 삽입한 자료는 본문의 일부가 되므로, 보고서를 생성하면 그대로 인쇄됩니다. 자료 아래에 해당 결과에 대한 해석을 함께 기술하면 읽는 사람이 근거를 바로 확인할 수 있습니다.

3 검사 간 교차분석

- 3-1 교차분석 개요
- 3-2 기준 점수 비교
- 3-3 영역별 소견 대조

3-1 교차분석 개요

- 좌측 [교차분석] 탭에서 여러 검사의 소견을 구성개념별로 대조합니다.
- 상단에 검사 수 · 불일치 영역 수 · 기준 보유 검사 수가 요약됩니다.



중요 · 서로 다른 검사의 원점수를 하나의 척도로 환산하지 않습니다. 표준화 검사(기준 보유)만 정량 비교하고, 투사적 검사는 정성 소견으로만 표시합니다. 검사 간 점수를 환산할 표준화된 근거가 존재하지 않기 때문입니다.

3-2 표준 점수 비교


- 표준이 있는 표준화 검사의 백분위 · T점수만 레이더 차트에 표시됩니다.
- 검사 칩을 눌러 차트에서 켜고 끌 수 있습니다.
- 점선은 표시된 검사들의 표준 평균선입니다.



투사적 검사(HTP · 로르샤하 · SCT)는 표준 점수가 없으므로 이 차트에서 제외되며, 아래 영역별 소견 대조에서 **정성 소견**으로 표시됩니다.

3-3 영역별 소견 대조

- 구성개념별로 소견 있음과 정상 범위 검사를 나란히 배치합니다.
- 불일치 판단은 점수 차가 아니라 임상적 방향(상승 vs 정상)이 같이는지로 합니다.
- 투사적 검사는 정성 배치와 함께 원 소견을 그대로 표기합니다.

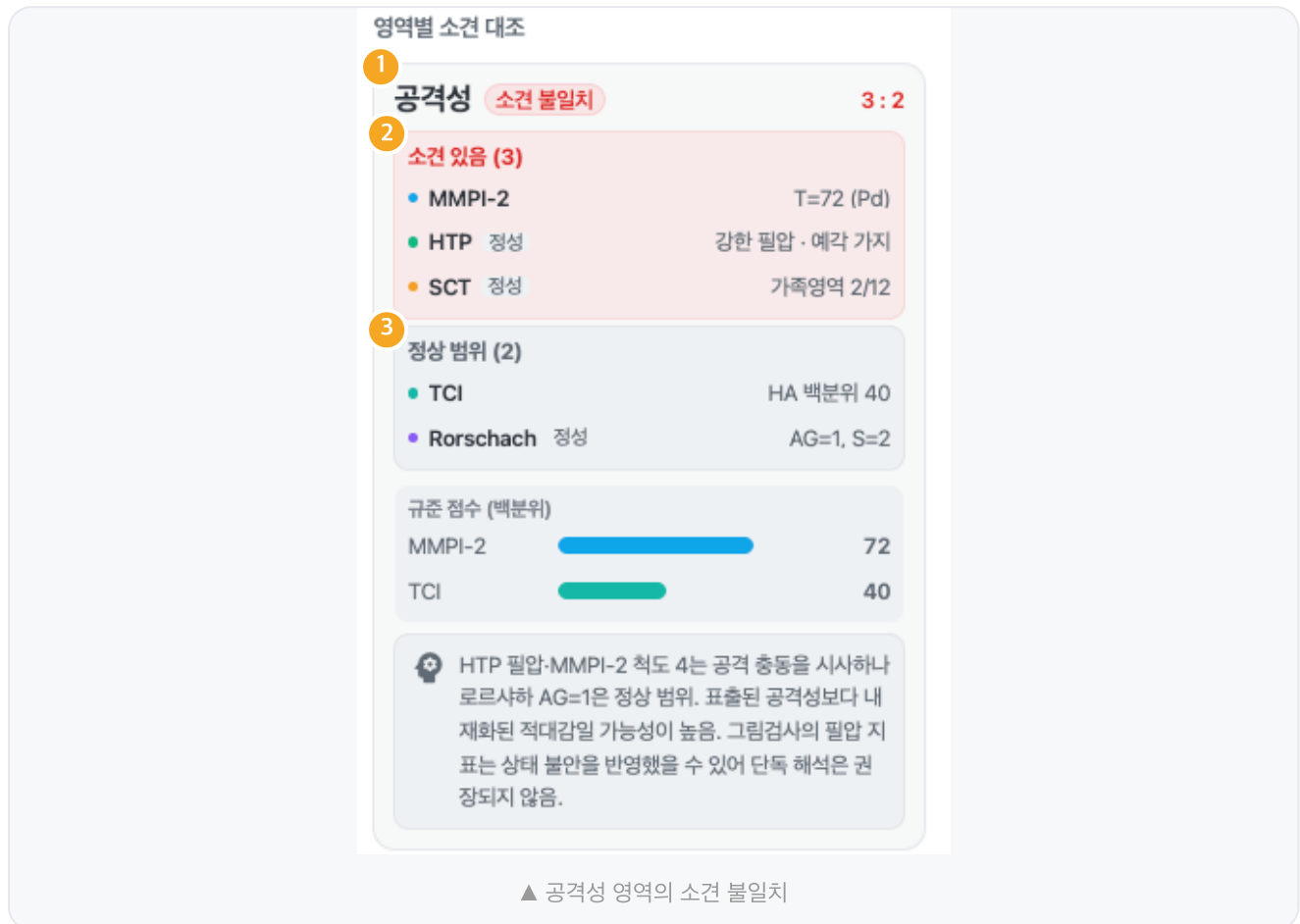

1 불일치 정도

- 소견 불일치 · 부분 불일치 · 일치 중 하나로 표시됩니다.

2 소견 있음

- 해당 영역에서 상승 소견을 보인 검사 목록입니다.

3 정상 범위

- 같은 영역에서 정상 범위로 나온 검사 목록입니다.

※ 하단 해석 문구는 두 검사가 경쟁하는 것이 아니라 서로 다른 층위(자기보고 vs 수행기반)를 측정한다는 관점에서 작성됩니다. 최종 해석은 임상가가 판단합니다.

4 구간별 AI 리뷰

- 4-1 리뷰 실행
- 4-2 리뷰 카드 읽기
- 4-3 수정안 적용

4-1 리뷰 실행

- 본문에서 검토할 문장을 드래그해 선택합니다.
- 선택 영역 옆에 [AI 분석] 버튼이 나타납니다. 클릭하면 리뷰 카드가 열립니다.

The screenshot displays a software interface for document review. On the left, a sidebar contains a '종합보고서' (Comprehensive Report) section with tabs for '검사결과 통합·작성' and '교차분석 AI'. Below this, there are sections for '영역별 소견 대조' (Comparison of Opinions by Area) and '불안 부분 불일치' (Discrepancies in Unstable Parts). The main area shows a document with a selected paragraph. A blue button labeled 'AI 분석' (AI Analysis) is positioned next to the selected text. The document content includes a list of items and a section titled 'V. 요약 및 제언' (Summary and Recommendations).

▲ 문장 선택 후 나타나는 [AI 분석] 버튼

구간별 리뷰는 **선택한 문장**만 검토합니다. 보고서 전체를 보려면 5장의 종합 AI 리뷰를 사용합니다.

4-2 리뷰 카드 읽기

- 리뷰 항목은 임상적 중요도 순으로 정렬됩니다.
- 카드 헤더를 끌어 위치를 옮길 수 있습니다. 본문이 가릴 때 사용합니다.
- 다른 문장을 선택하면 카드가 그 옆으로 다시 배치됩니다.

종류	의미
검토 필요	단정적 서술 · 진단명 직접 기술 등 작성 원칙과 관련된 지적
근거 연결	인용된 수치가 검사 결과와 대조되는지 확인한 결과
표현 제안	문장 길이 · 검사 간 불일치 반영 권고
맞춤법 / 표현 개선	이중 피동 · 임상 용어 등 문체 교정

AI 리뷰 (7건)
✕

선택 구간
 "6) 공격성 — HTP의 강한 필압과 예각 처리, MMPI-2 척도 4(Pd) 상승은 공격 충동이 매우 높다..."

수정 후 미리보기
3곳 변경

6) 공격성 — HTP의 강한 필압과 예각 처리, MMPI-2 척도 4(Pd) 상승은 공격 충동이 **유의하게 상승되어 있음을** 시사하나, 로르샤하 AG 반응은 1개로 정상 범위에 해당한다. **내담자의 경우** 표출된 공격성보다는 내재화된 적대감으로 해석된 것으로 판단된다.

3곳 모두 적용

검토 필요

단정적 서술 — 완화 표현 권장

투사적 검사 해석은 확정 진단이 아닌 가설로 기술해야 합니다. "-로 시사된다", "~가능성이 있다" 형태를 권장합니다.

근거 연결

검사 근거와 연결됨

인용된 수치가 로르샤하 구조요약 · MMPI-2 프로파일과 대조 확인되었습니다. 출처 표기를 함께 두면 신뢰도가 높아집니다.

표현 제안

문장이 길니다

144자 — 2개 문장으로 분리하면 가독성이 개선됩니다. 임상 보고서 권장 길이는 60~80자입니다.

표현 제안

검사 간 소견 불일치

공격성 영역에서 HTP(강한 필압·예각)와 MMPI-2(T=72)는 상승을 시사하나 로르샤하(AG=1)는 정상 범위입니다. 이 문단이 공격성을 다룬다면 불일치를 함께 기술하는 것이 좋습니다.

AI 보조 의견 · 최종 판단은 임상가가 결정합니다

▲ AI 리뷰 카드

4-3 수정안 적용

- 수정 제안이 있는 항목에는 변경 전후가 함께 표시됩니다.
- [이 수정안 적용]은 해당 1건만 반영합니다.
- 카드 상단의 [N곳 모두 적용]을 누르면 제안된 교정을 한 번에 반영합니다.

 수정 후 미리보기

3곳 변경

6) 공격성 — HTP의 강한 필압과 예각 처리, MMPI-2 척도 4(Pd) 상승은 공격 충동이 **유의하게 상승되어 있음을** 시사하나, 로르샤하 AG 반응은 1개로 정상 범위에 해당한다. **내담자의 경우** 표출된 공격성보다는 내재화된 적대감으로 **해석된** 것으로 판단된다.

✓ 3곳 모두 적용

 맞춤법

'해석되어진' → '해석된'

'되어진'은 이중 피동입니다.

해석되어진 → 해석된

 이 수정안 적용

 표현 개선

보고서 문체로 다듬기

주관적 강조어 대신 임상 용어를 권장합니다.

매우 높다는 점을 → 유의하게 상승되어 있음을

 이 수정안 적용

▲ 변경 전 → 변경 후 미리보기와 적용 버튼

AI가 본문을 임의로 고치지 않습니다. 제안된 내용을 확인하고 버튼을 눌러야 반영되며, 반영 여부는 전적으로 작성자가 결정합니다.

5 종합 AI 리뷰

- 5-1 분석 실행
- 5-2 결과 읽기
- 5-3 수정안 검토와 반영

5-1 분석 실행

- 톨바 우측 [AI 종합 리뷰]를 클릭하면 우측 패널이 열리고 분석이 시작됩니다.
- 네 단계로 진행되며, 각 단계의 소요 시간은 작업량에 따라 다릅니다.

단계	내용
1	문서 구조 파악 — 섹션 구성과 분량을 확인합니다
2	검사 결과 대조 — 첨부된 검사가 본문에 반영되었는지 확인합니다
3	서술 일관성 검토 — 문서 안에서 상반된 기술이 없는지 확인합니다
4	표현·문체 점검 — 구간별 지적을 문단 단위로 집계합니다

< 검사 목록
(571201)

종합보고서
문단 34 / 글자 1722

검사 결과 통합 · 작성
AI 종합 리포트

검사자료 **교차분석**

- MMPi-2
- S-척도
- TCI

점진 = 표준화 검사 평균 - 검사영역 높여 표시 전환

HTP - Rorschach - SCT는 평균 중간치 산출되지 않는 통상적 검사이므로 항상 비교하여 제작하고, 아래에 점진 소견으로 대표합니다.

언어발달 소견 대조

공격성	소견 범위
소견 있음 (3)	T=72 (Pd)
MMPi-2	강한 위협·예기·가지
HTP	가죽인형 2/22
SCT	정신

정신 발현 (2)

TCI	HA 역본위 40
Rorschach	정신 AG=1, Si=2

규준 참조 (대부분)

MMPi-2	72
TCI	40

HTP 일일 MMPi-2 척도 4는 공격 충동을 시사하나, TCI에서 Ag=1은 정신 안정, 표준화 공격척도에 비해 낮은 수준임을 나타내며, 그립스칼라 점수가 높음. 그림자검사 및 양자 표는 상대 불완전 반영률을 보이며 더욱 해석은 완장치가 있음.

불안 부분 불일치

소견 있음 (4)

- S-척도
- HTP
- Rorschach
- SCT

정신 발현 (2)

- MMPi-2

V. 요약 및 제언

종합하면, 내담자는 경미한 수준의 우울과 함께 낮은 자기개념이 전 검사에서 일관되게 확인된다. TCI에서 나타난 높은 연대감과 로르샹카 CDI 상순은 대인 차원의 부족을 공통적으로 시사하며, 이것이 정서적 고통을 지속시키는 요인으로 작용하는 것으로 보인다. 높은 자기개념과 비례 인내력이 뒷받침되지 않는 기질적 불균형 또한 주요 치료의 어려움과 관련 될 수 있다.

- 자기개념 회복에 초점을 두면 개인 성장을 우선 고려한다.
- 정서 조절 및 대인관계 기술 훈련의 필요성을 고려할 수 있다.
- 우울 수준에 대한 정기적 재평가가 필요하다.

본 결과는 심리평가의 보조 자료로서, 임상적 판단 및 다른 정보와 종합하여 해석되어야 한다.

5-2 결과 읽기

- 완성도 점수(0~100)와 함께 검토사항이 나열됩니다.
- 각 항목의 색 점이 심각도이며, 마우스를 올리면 설명이 표시됩니다.
- [이동]을 누르면 본문의 해당 위치로 이동합니다.

The image shows a 'AI 종합 리뷰' (AI Comprehensive Review) window. At the top, it says '보고서 전체를 문서 단위로 검토합니다.' (Review the entire report by document unit). Below this, a progress bar shows '보고서 완성도' (Report Completion) at 55%, with '1,674자 · 섹션 5개 · 검사 6/6 반영' (1,674 characters · 5 sections · 6/6 checks reflected). The '검토사항' (Review Items) section lists three items: 1. '섹션 누락' (Section Missing) with a red dot, 2. '서술 모순' (Description Contradiction) with a red dot, and 3. '표현 교정' (Expression Correction) with an orange dot. Each item has a description of the issue and a '초안 작성' (Draft Writing) button. At the bottom, there is a '작성 체크리스트' (Writing Checklist) with five items: '필수 섹션 5개 구성' (Configure 5 required sections), '모든 섹션에 내용 기술' (Describe content in all sections), '전체 검사 결과 반영' (Reflect overall check results), '문서 내 서술 일관성' (Consistency of descriptions in the document), and '분량 확보 (800자 이상)' (Secure volume (800+ characters)). A '다시 분석' (Analyze Again) button is at the bottom right. The window is titled '▲ 검토 결과' (Review Result).

- 1 완성도 점수**
 - 글자 수 · 섹션 수 · 검사 반영 현황이 함께 표시됩니다.
- 2 검토 종류와 심각도**
 - 섹션 누락 · 서술 모순 · 결과 미반영 · 표현 교정으로 구분됩니다.
- 3 이동**
 - 본문에서 해당 위치를 바로 확인합니다.
- 4 수정안**
 - 버튼을 누르면 미리보기가 열립니다. 바로 반영되지 않습니다.

5-3 수정안 검토와 반영

- 미리보기에서 변경 전후를 확인합니다.
- 같은 표현이 여러 곳에 있으면 몇 곳이 바뀌는지 안내합니다.
- [본문에 적용]을 누르면 반영되고, 점수와 검토사항이 즉시 갱신됩니다.

The screenshot shows a medical report review interface. On the left, a sidebar contains report details like '검사 목적' (Purpose of Exam) and '검사 결과 통합·작성' (Integration and Writing of Exam Results). The main area displays the original report text and a revised version. A central dialog box titled '초안 작성' (Draft Creation) shows the revised text. The right-hand panel includes an 'AI 종합 리뷰' (AI Comprehensive Review) section with a score of 55, a '검토사항' (Review Items) list, and a '작성 체크리스트' (Writing Checklist).

▲ 수정 미리보기

서술 모순은 양쪽 선택지를 제시합니다. 어느 쪽이 맞는지는 검사 결과와 임상적 판단으로 결정할 문제이므로, AI가 한쪽을 고르지 않습니다.

5-3 수정안 검토와 반영 (계속)

- 반영하면 해당 검토사항이 목록에서 사라지고 완성도 점수가 오릅니다.
- 남은 검토사항을 차례로 처리하며 보고서를 완성합니다.
- 하단 작성 체크리스트에서 항목별 충족 여부를 확인할 수 있습니다.

AI 종합 리뷰
✕

보고서 전체를 문서 단위로 검토합니다

보고서 완성도
 1,850자 · 섹션 5개 · 검사 6/6 반영

검토사항 2건
주요 1건

↩️ 서술 모순 ●
🏠 이동

үүл 수준 서술이 문서 내에서 일치하지 않습니다

앞부분에서는 '중등도'로, 뒷부분에서는 '경미'로 기술되어 있습니다.
어느 쪽이 최종 판단인지 통일해 주세요.

'중등도'로 통일
 '경미'로 통일

A 표현 교정 ●
🏠 이동

표현 교정 제안 3건이 있습니다

가장 많은 곳은 "6) 공격성 — HTP의 ..." 문단(3건)입니다. 문장을 선택하면 개별 수정안을 확인할 수 있습니다.

작성 체크리스트

- ✓ 필수 섹션 5개 구성
- ✓ 모든 섹션에 내용 기술
- ✓ 전체 검사 결과 반영
- ☐ 문서 내 서술 일관성
- ✓ 분량 확보 (800자 이상)

본 검토 결과는 작성 보조를 위한 참고 정보입니다. 최종 판단과 수정 여부는 임상가가 결정합니다.

↻ 다시 분석

▲ 수정안 반영 후 점수가 오른 상태

작성 체크리스트

✓ 필수 섹션 5개 구성

✓ 모든 섹션에 내용 기술

✓ 전체 검사 결과 반영

☐ 문서 내 서술 일관성

✓ 분량 확보 (800자 이상)

▲ 작성 체크리스트

6. 보고서 생성

- 작성을 마치면 우측 상단 [보고서 생성]으로 PDF를 내려받습니다.
- 표지와 마지막 장의 표시 여부는 툴바의 화면 표시 설정에서 조정합니다.
- 본문에 첨부한 검사자료 이미지도 함께 인쇄됩니다.

The screenshot displays the 'Report Generation' interface of the ACLA system. The interface is divided into several sections:

- Left Sidebar:** Contains navigation links like '검사 목적' (Test Purpose), '종합보고서' (Comprehensive Report), and '검사결과 통합·작성' (Integrate and Create Test Results). It also shows a summary of test results for 'MMPI-2', 'S-척도', and 'TCI'.
- Central Text Editor:** Features a rich text editor with various formatting options (bold, italic, underline, etc.) and a 'Report Generation' button. The main content area displays a report template with fields for patient information (e.g., '문단 34 - 글자 1901') and a list of test results.
- Right Sidebar:** Includes an 'AI 통합 리뷰' (AI Integrated Review) section showing a 100% completion rate. Below this is a 'Report Preview' section showing a sample report page with a title, patient information, and a list of test results.

작성 원칙 · AI는 초안과 검토 의견을 제시하는 보조 도구입니다. 보고서에 담기는 모든 해석과 판단의 최종 책임은 작성자인 임상가에게 있습니다.